



>>> *Zeit ist Geld!*

>>> Magicap® & Magic Composite, eignen sich für:

- > Verblendungen auf Metallgerüsten, Zirkon und PEEK
- > Teleskopkronen und kombinierte Arbeiten
- > Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers
- > Implantat-Suprakonstruktionen
- > Vollkomposit-Kronen
- > Adhäsiv-Brücken

>>> Ästhetik >>> Vielfalt >>> Geschwindigkeit

>>> Zeit ist Geld!

In der modernen Zahntechnik spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle, z. B. im Hinblick auf den immer häufigeren Termindruck und die stetig steigenden Arbeitskosten. Nicht nur der rasante technologische Fortschritt und die damit verbundenen Möglichkeiten, gerade die hohen Arbeitskosten in den Industrienationen erklären die zügig fortschreitende Digitalisierung in der Zahntechnik.

>>> Aber - muss es denn immer digital sein?

Wäre es nicht schön, wenn es eine einfache Technik gäbe, die ästhetisch und funktionell hochwertig, kostengünstig und doch so schnell ist, dass sie die Produktivität und damit Wertschöpfung Ihres Dentallabors deutlich erhöht? Moderne Hochleistungskomposite z. B.

bieten technologisch wie physiologisch einige unbestreitbare Vorzüge gegenüber den etablierten Zirkon- und Metall-Keramik-Systemen. Besonders im Hinblick auf das natürliche Abrasionsverhalten rückt dieser Werkstoff immer mehr in den Fokus. Dennoch, das Schichten und Modellieren anatomisch und ästhetisch korrekter Zahnformen mit Kompositen ist zeitraubend und stellt so manchen Techniker vor eine wahre Geduldsprobe.

Hier kommt Magicap® ins Spiel: Beim Magicap® System schichtet der Techniker das Verblendmaterial nicht mehr frei, er wählt stattdessen eine passende Zahnform Folie (Brique) aus und beschichtet sie von innen mit der gewünschten Inzisal- und Dentinmasse. Nach dem Aufsetzen auf den Zahnstumpf bzw. das Gerüst erfolgt ein kurzes Ausrichten mit abschließender Kontrolle der Okklusion. Lichthärten. Ränder korrigieren. Polieren. Fertig!

>>> Magicap® und Magic Composite, ein magisches Duo ...

Mit Magicap® und Magic Composite fertigen Sie innerhalb kürzester Zeit ästhetisch hochwertige Restaurationen an. Je nach Ausbildungsstand und Fertigkeit des ausführenden Technikers kann die Zeitersparnis im Vergleich zu einer frei geschichteten Verblendung schnell zwischen 35 und 70 % liegen. Das bedeutet eine enorme Steigerung der Produktivität und damit der Wertschöpfung! Das patentierte Magicap® System eignet sich hervorragend zur Herstellung von hochwertigem permanentem Zahnersatz.

Die umfangreiche Magicap® Bibliothek mit rund 260 verschiedenen Formen (Briques) bietet Ihnen die Möglichkeit, für nahezu jeden Patienten die passende Zahnform auszuwählen. Mit diesem kostengünstigen Verfahren erzielen selbst ungeübte Anwender in kürzester Zeit überaus ansprechende Ergebnisse. Zudem entfällt die sonst beim polymerisieren von Kompositen übliche Dispersionsschicht komplett.

So wird die Arbeit mit Magicap® und Magic Composite zum Kinderspiel, langwieriges Schichten und Modellieren entfällt, der praktische und robuste Kompositwerkstoff kann endlich seine Vorzüge voll entfalten. Auch der Behandler profitiert von den günstigen Materialeigenschaften: Nachbearbeiten oder eine notwendige Reparatur können problemlos direkt am Behandlungsstuhl, also im Patientenmund durchgeführt werden.

>>> Magic Composite, arbeiten nach dem bionischen Prinzip ...

Ein überschaubares Sortiment von Dentin- und Inzismassen in Pastenform, erweiterbar mit den passenden Opakern, Primern und Bondern, ebnet den Weg zum gesamten Anwendungsspektrum von Magic Composite. Magic Composite orientiert sich am Farbsystem des klassischen Vita* Farbrings, alle 16 Farben können problemlos wiedergegeben werden. Mit geringem Aufwand erhalten Sie ästhetisch ansprechende Ergebnisse und der

>>> Magicap® & Magic Composite:

- > Natürliche Ästhetik
- > Für Allergiker geeignet
- > Keine Gefahr von Chipping
- > Natürliches Abrasionsverhalten
- > Korrektur und Reparatur im Mund möglich
- > Perfekt für permanenten Zahnersatz geeignet



sprichwörtliche „Chamäleon-Effekt“ sorgt dafür, dass sich Magic-Composite-Restaurationen unauffällig in das vorhandene Restgebiss eingliedern lassen.





Die besondere Zusammensetzung von Magic Composite imitiert auf einzigartige Weise die Härte und Abrasionsfestigkeit des natürlichen Zahnschmelzes und die Elastizität des natürlichen Dentins. Die Kombination aus der nötigen Oberflächenhärte der Inzismassen und der unverzichtbaren Elastizität des Dentinkerns ermöglicht eine lange Lebensdauer der Restaurationen. Bei korrekter Verarbeitung können somit Abplatzungen praktisch ausgeschlossen werden. Die Härte und Dichte der Oberfläche garantieren zudem eine sehr geringe Plaque-Affinität. Magic Composite ist abrasionsstabil und verschleißfest, dennoch elastisch und antagonistenfremdlich – arbeiten nach dem bionischen Prinzip!

>>> **Gesteigerte Wertschöpfung / Produktivität im Labor**

>>> **Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis**

>>> **So einfach geht's:**

- > 1. Passende Folie auswählen
- > 2. Folie nach Bedarf zurechtschneiden
- > 3. Inzisal- und Dentinmasse einschichten und aufsetzen
- > 4. Aushärten und Folie entfernen, Ränder korrigieren, polieren >>> fertig!

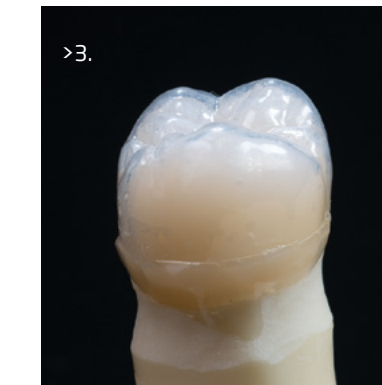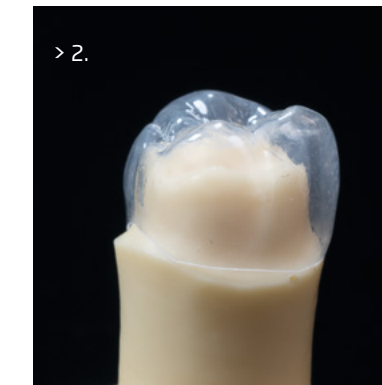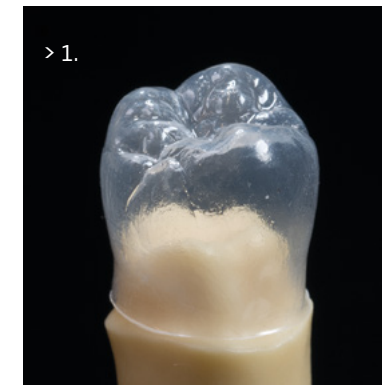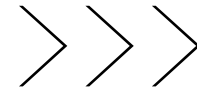

* Vita ist eine eingetragene Marke der Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co-KG, Bad Säckingen

>>> *Magie ist die Kunst, die Dinge zu nutzen,
die die Wissenschaft noch nicht erforscht hat.*

- Maz Bour -



MAGICAP® & MAGIC COMPOSITE

Baumann Dental GmbH
Frankenstr. 25
D-75210 Keltern
fon: +49 (0) 7236-933 69 0

www.magicap-dental.de

